

SenSura[®] Mio

SenSura[®] Mio Flex

Passer Fantastisk · Føles Rigtig

2-dels system

- Elastisk klæber
- Sikker vedhæftning over brok, ar og folder
- Neutralt Gråt tekstil
- Cirkel Filter – reducerer ballooning
- Fleksibel kobling



SenSura[®] Mio Flex 2-dels system

Til alle stomityper: Kolostomi, Ileostomi, Urostomi



BodyFit Teknologi

SenSura Mio Flex er baseret på BodyFit Teknologi. Mennesker er forskellige og har individuelle kroppsfaconer og livsstile. Med det i tankerne designer vi produkter.



Den elastiske klæber tilpasser sig individuelle kroppsfaconer

Elasticitet er nøglen til at finde den rigtige vedhæftning. SenSura Mio Flex har en elastisk klæber, som tilpasser sig individuelle kroppsfaconer og følger kroppens naturlige bevægelser. Den elastiske klæber giver en sikker vedhæftning over brok, ar og folder.

Designet til diskretion


Posedesign i Neutralt Gråt tekstil

SenSura Mio Flex er designet i et blødt Neutralt Gråt tekstil, der er diskret under tøj – selv under hvidt tøj.

Posematerialet er meget holdbart, det fnulrer ikke og er vandafvisende. SenSura Mio har en meget lav poseprofil, der reducerer posefremfald og derved sikrer diskretion.

Cirkel Filter

Det unikke for-filter sikrer en bedre beskyttelse mod tilstopning. Det er dokumenteret, at det kan reducere tilfælde med ballooning med op til 61%*.

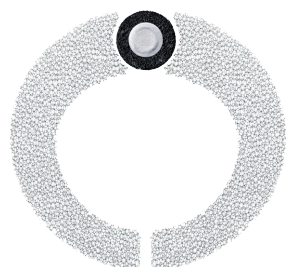

* Coloplast, klinisk studie 2010



Bredt 2-dels sortiment

Klæberen findes med opklipbare og forudstandsede hulstørrelser. Klæberen er forsynet med en tydelig klippeguide, der er let at klippe efter. Man kan vælge mellem mini, midi og maxi poser. Et vindue på forsiden af posen gør påsætning og kontrol af stomien enkel. Man kan vælge en pose med eller uden vindue eller en transparent pose.

Fleksibel kobling

SenSura Mio Flex er et blødt og fleksibelt 2-dels system, hvor plade og pose tilsammen danner en blød kobling. Koblingen mellem plade og pose er en klæber. Posen påsættes og klæber sig fast til den gennemsigtige koblingsflange på pladen, og sidder hermed sikkert fast. Systemet er let at anvende. Der kræves ingen kræfter ved påsætning og aftagning.

Ileostomipose med Hide-away udløb

SenSura Mio Flex ileostomipose er forsynet med det velkendte Hide-away udløb. Hide-away udløbet har en sikker, blød og hygiejnisk lukning. Hide-away udløbet er forsynet med et stykke velcro, som gør det muligt at fastgøre udløbet oppe under den bløde forside. Ligeledes er det muligt at folde posen til halv størrelse i situationer, hvor der ønskes yderligere diskretion.



Urostomi Flerkammerpose

SenSura Mio Flex 2-dels urostomi flerkammerpose kombinerer diskretion med komfort. Fordelene ved flerkammerposen er, at urinen fordeles jævnt, og at der dermed opstår færre skvulpelyde, hvilket øger diskretionen. For at sikre, at urinen ikke løber tilbage, er flerkammerposen forsynet med en tilbageløbsventil. Posens bløde udløb kan foldes op og skjules i en lomme, således at udløbet ikke generer.



SenSura Mio urostomiposer kan kombineres med

- Natpose
- Benpose